




GARROT – SOF Tourniquet

<https://www.tacmedsolutions.com/SOF-Tactical-Tourniquet-Wide>

Téléchargé sur <https://lavaiill.net>

© Dr Loïc LAVAILL

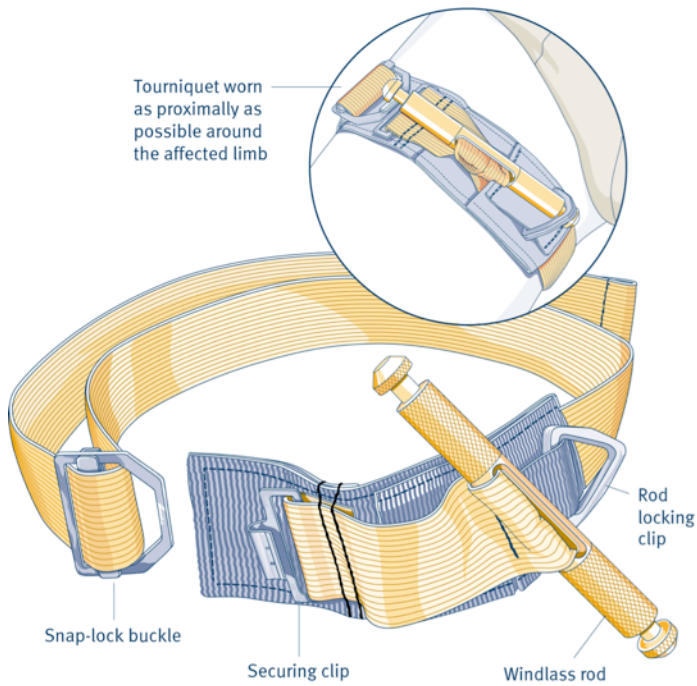

GARROT SOF TT-W


Présentation générale

Indications :


- Hémorragie grave engageant le pronostic vital et n'étant pas contrôlée par une pression directe et/ou indirecte
- Blessures multiples avec hémorragies des extrémités de membres et manque de ressources pour contrôler simplement l'hémostase

Complications :


- Syndrome de loges
- Recirculation de toxines lors de la libération du garrot
- Embolies
- Lésions nerveuses, vasculaires, musculaires ou cutanées
- Fractures
- Douleurs

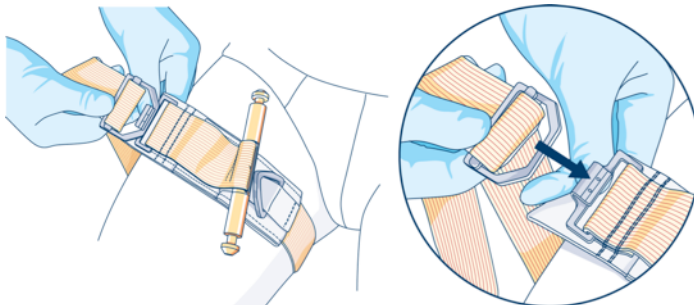


Mise en place du garrot autour du membre touché, le plus proche possible de la racine du membre. Accrocher la boucle sur son support.

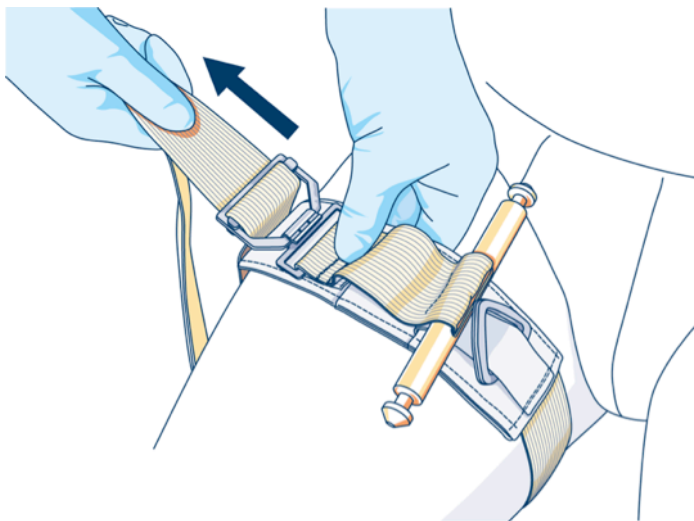

Tirer fermement sur la sangle au travers de la boucle de verrouillage, de manière à ce que le garrot soit appliqué de manière serrée contre le membre lésé.

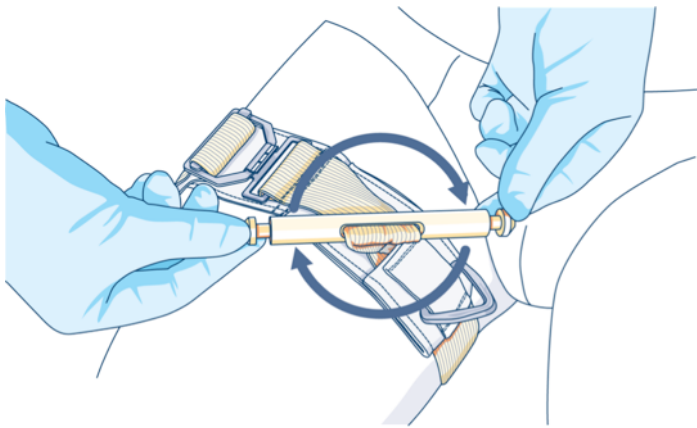


Tourner la barre de traction jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie. En cas d'échec de contrôle hémorragique, envisager de resserrer la sangle ou d'ajouter un second garrot immédiatement adjacent au premier.

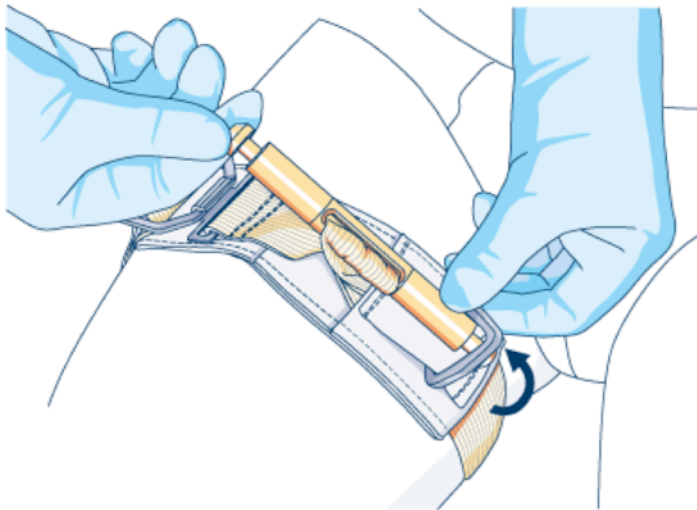

Sécuriser la barre de traction au travers des boucles de fixation.

Noter précisément l'heure de fermeture du garrot sur celui-ci ainsi que sur la feuille d'intervention, de sorte que ces données soient transmises aux équipes hospitalières.

Torniquet positioned as proximal as possible around affected limb

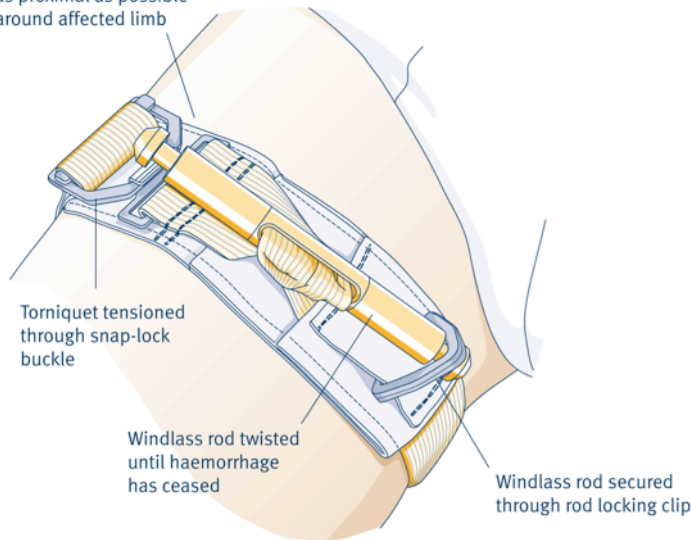

VUE D'ENSEMBLE DU GARROT

Après positionnement et fermeture de celui-ci.

Torniquet positioned as proximal as possible around affected limb

Garrot positionné de la manière la plus proximale possible autour du membre touché

Torniquet tensioned through snap-lock buckle

Mise en tension du garrot autour de la boucle de verrouillage

Windlass rod twisted until haemorrhage has ceased

Barre de traction tournée jusqu'au contrôle de l'hémorragie

Windlass rod secured through rod locking clip

Barre de traction sécurisée au travers des clips de verrouillage